



ATMOS iDocuments GYN


Программное обеспечение для документирования КОЛЬПОСКОПИИ

*Exactly
what
I need*

ATMOS Gynecology

Универсальное решение для гинекологии.

ATMOS MedizinTechnik с гордостью представляет ATMOS iDocuments GYN — инновационное программное обеспечение для документирования, которое позволяет гинекологам быстрее проводить скрининги на дисплазию и документировать их. Программное обеспечение может быть легко интегрировано в существующие ИТ-среды.

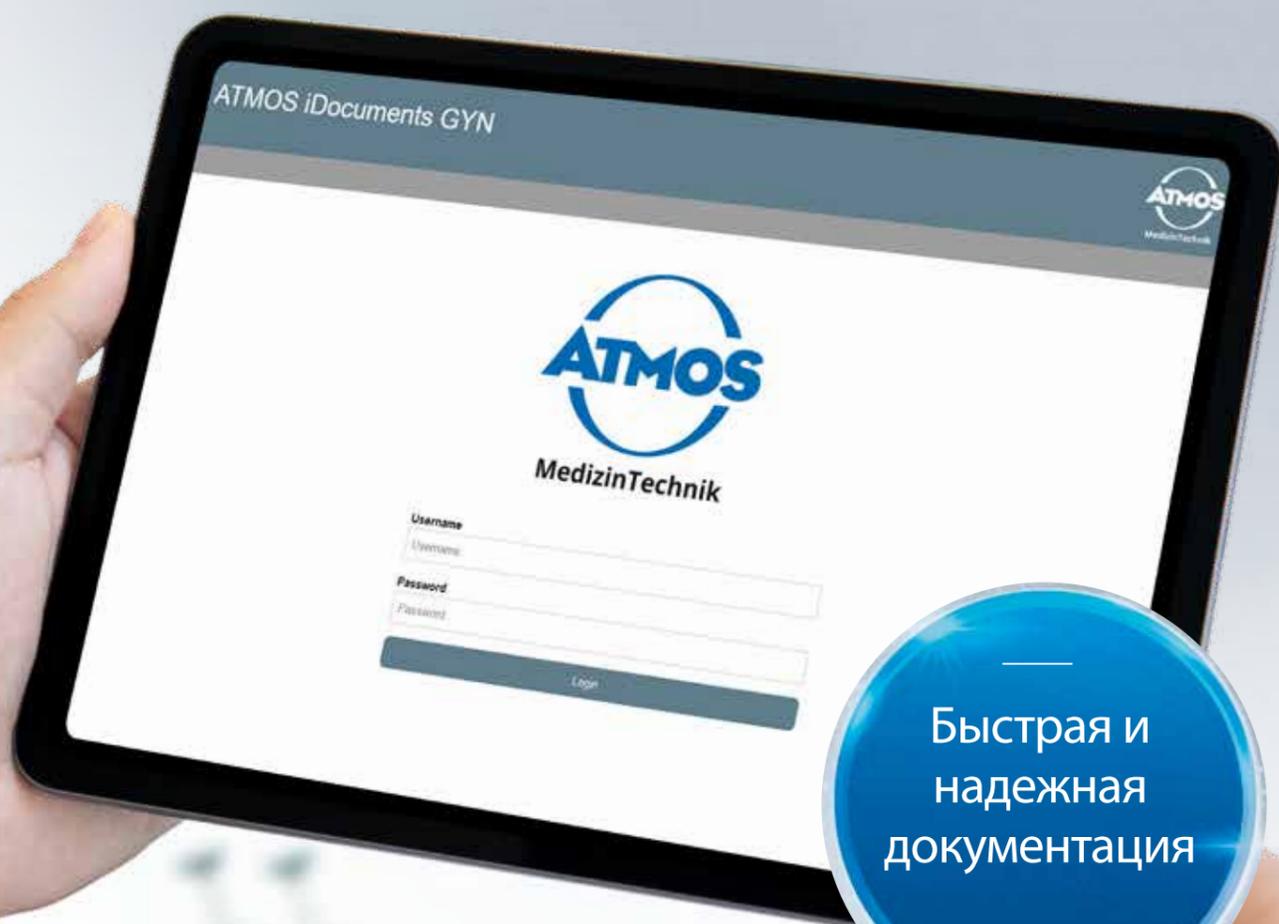

Быстрая и надежная документация

РАЗРАБОТАНО ДЛЯ ГИНЕКОЛОГОВ
ATMOS iDocuments GYN был разработан в тесном сотрудничестве с ведущими экспертами и обладает рядом специальных технических особенностей, которые позволяют выполнять трудоемкие этапы обследования и документирования гораздо быстрее и удобнее.

С помощью нового программного обеспечения ATMOS основные данные пациента можно легко и быстро импортировать из локальной информационной системы. Функция редактирования изображений может использоваться для добавления графических маркеров или текста к отдельным изображениям. Для более быстрой подготовки

отчетов ATMOS iDocuments GYN предлагает полностью оцифрованный шаблон отчета о кольпоскопии, основанный на номенклатуре IFCPC:

в программном обеспечении отдельные поля могут быть активированы или деактивированы простым нажатием на них, или к отдельным изображениям могут быть добавлены дополнительные примечания с помощью функции комментариев. Все это не только делает обследование и документирование более удобными для гинекологов, но и приводит к значительной экономии времени — при каждом скрининге дисплазии.



ЦЕНИТСЯ ИТ-СПЕЦИАЛИСТАМИ
Закрытая и независимая от производителя система, которая не требует локальной установки на конечных устройствах и может быть легко подключена к существующей системе больницы через интегрированные интерфейсы DICOM или GDT:

Это делает ATMOS iDocuments GYN оптимальным решением для ИТ-отделов, которым требуется программное обеспечение для документирования гинекологических обследований, простое в установке, использовании и обслуживании.



ATMOS iDocuments GYN

Для оптимального рабочего процесса во время скрининга дисплазии.

От установки до обследования и документирования: ATMOS iDocuments GYN впечатляет на каждом этапе, а благодаря своей веб-концепции и функциям вносит заметный вклад в оптимизацию рабочего процесса при гинекологических осмотрах.

Значительная экономия времени

Благодаря оптимизированным процессам документирования

- Автоматическое структурирование импортированных данных пациента в соответствии с текущей стадией обследования
- Гибкая запись изображений с помощью кольпоскопа
- Быстрый предварительный просмотр изображений в программном обеспечении
- Редактирование цифровых изображений путем добавления графических маркеров или текстовых комментариев

Максимальная надежность процесса

Благодаря документации, управляемой системой

- Чёткая структура, интуитивно понятная концепция работы и стандартизированные процессы
- Эффективная отчетность по изображениям благодаря интеграции текстовых шаблонов с помощью перетаскивания
- Доступны различные текстовые шаблоны (в соответствии с номенклатурой IFCPS или редактируются пользователем)
- Экономящее время создание отчетов с использованием цифрового шаблона отчёта о кольпоскопии

Простая интеграция

Благодаря установке "из коробки"

- Простая интеграция в существующую практику или больничные сети
- Веб-концепция, не требующая установки клиентов на конечные устройства
- Безопасный импорт и экспорт данных через интерфейс DICOM или GDT
- Доступно в версиях на различных языках

iDocuments GYN



ATMOS iDocuments GYN — ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ

Процесс документирования? Оптимизирован.

Всё в нужном месте в нужное время: Чтобы врачи могли уделять максимум внимания пациенту во время обследования, ATMOS iDocuments GYN предоставляет им идеальную поддержку на каждом этапе обследования.

ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС

Многие мелочи влияют на ход скрининга на дисплазию.

Но скрининг на дисплазию - это совсем не мелочь. По этой причине ATMOS iDocuments GYN объединяет все темы, относящиеся к обследованиям и документации, на единой платформе и создает рабочий процесс, который эффективно направляет врачей, тем самым заметно снижая рабочую нагрузку.

Например, импортированные данные пациента автоматически структурируются во время обследования, и пациенту присваивается чёткий статус в программном обеспечении в зависимости от стадии обследования. Врач может сразу увидеть всю необходимую информацию и приступить к следующим шагам, не теряя времени. Новое программное обеспечение ATMOS также предлагает поддержку с документацией. Графическое редактирование можно выполнять быстро и легко, а к изображениям можно добавлять комментарии в виде свободного текста для предоставления дополнительной информации.



Простая запись изображения с помощью кнопок на панели управления ATMOS i View COLPO

Значительная
экономия
времени

Автоматический индикатор состояния

После импорта данных пациента они автоматически настраиваются на соответствующий статус обследования (например, "Новый пациент" или "В процессе"). Поиск в режиме реального времени упрощает отбор пациентов/



Гибкая запись изображений

Во время обследования можно делать записи с помощью кнопок на панели управления ATMOS i View COLPO, ножного переключателя или программного обеспечения. После последующего предварительного просмотра записей в программном обеспечении или на дополнительных конечных устройствах (например, планшете, ноутбуке, ПК) записи можно редактировать или удалять по отдельности.



Универсальное редактирование изображений

Отдельные изображения можно комментировать, вставляя графические маркеры или комментарии в виде свободного текста. Если необходимо сохранить исходную запись дополнительная информация сохраняется в копии





ATMOS iDocuments GYN — ДОКУМЕНТАЦИЯ

Диагностическое оборудование? Произведение искусства.

Два продукта, которые идеально дополняют друг друга: С помощью ATMOS i View COLPO компания ATMOS MedizinTechnik предлагает гинекологам технически превосходный кольпоскоп, который устанавливает новые стандарты в удобстве использования и качестве изображения, а в сочетании с ATMOS iDocuments GYN обеспечивает оптимальные результаты обследования.



ИНТЕГРИРОВАННЫЙ КОЛЬПОСКОП
ATMOS i View COLPO предназначен для гинекологических обследований, обеспечивает впечатляющую интенсивность освещения, глубину резкости и интуитивно понятное управление. Инновационная светодиодная технология обеспечивает однородное освещение, естественную цветопередачу и низкую тепловую нагрузку на слизистую оболочку. Высокопроизводительная оптика даёт высокое разрешение и цветокоррекцию 3D-изображений.



МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ШТАТИВА
Напольный мобильный штатив ATMOS позволяет установить кольпоскоп в определенном положении во время обследования или при необходимости переместить его в другой смотровой кабинет. Напольный штатив, оснащён прочными роликами и надежными тормозами, легко перемещается или фиксируется и обеспечивает большую гибкость при изменении условий обследования.

info



НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ВИДЕНИЯ

Прочтите брошюру ATMOS i View COLPO и узнайте об уникальных преимуществах кольпоскопа для повседневной работы в гинекологических кабинетах или больницах.



Отсканируйте
QR-код и загрузите
брошюру

Идеально подходит для раннего выявления рака шейки матки

Превосходный контраст. С фильтром H.A.S.I.

Благодаря сочетанию запатентованной светодиодной технологии, которая бережно относится к тканям, с оптическим фильтром, реализованным компанией ATMOS, структуры отображаются со значительно большей контрастностью и четкостью. Использование фильтра H.A.S.I. показывает в среднем на 20 % лучшее контрастирование сосудистых изменений, чем при использовании обычного зеленого фильтра.




 Зона обследования



Без фильтра



Зеленый фильтр

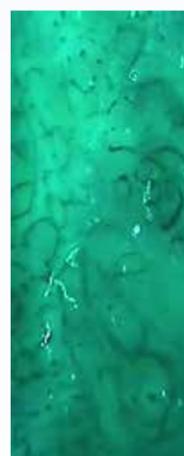

H.A.S.I. фильтр

H.A.S.I. ФИЛЬТР

"Hemoglobin Absorption Spectral Imaging" для непревзойденного повышения контрастности сосудов слизистой оболочки




ATMOS iDocuments GYN — ДОКУМЕНТАЦИЯ.

Отчетность? Поддерживается системой.

Шаг за шагом к оптимальному отчету: Для всестороннего и быстрого документирования гинекологических обследований программное обеспечение ATMOS iDocuments GYN использует стандартизированные процессы, готовые текстовые шаблоны и интуитивно понятное управление.

ЧЕТКИЙ МАКЕТ

Данные пациента, изображения, текстовые шаблоны: всю информацию, необходимую для составления отчетов, можно найти в одном интерфейсе в новом ATMOS iDocuments GYN. Врачу не нужно собирать информацию из других систем, а вместо этого он может начать заполнять отчет сразу после окончания обследования — даже когда пациент еще одевается.

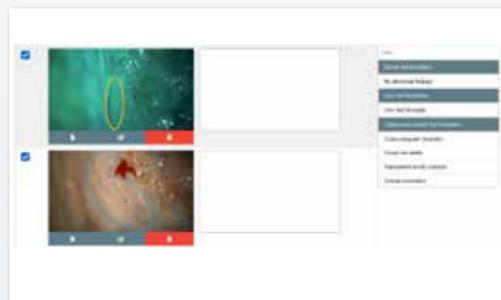

ИНТУИТИВНО ПОНЯТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Чтобы ничего не упустить из виду при создании отчетов, программное обеспечение безопасно и эффективно помогает гинекологам в процессе документирования с помощью кнопок, которые легко распознать и понять. Обучению приходит быстро, поэтому даже при создании второго отчета врач уже точно знает, какие шаги еще необходимо предпринять и какую поддержку и опции предлагает ему программное обеспечение.

ПРОСТАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

В дополнение к возможности комментировать изображения с помощью произвольного текста, врачи также могут использовать новое программное обеспечение для документирования ATMOS для присвоения изображению готовых текстовых шаблонов — простым перетаскиванием. Для этой цели доступны два типа текстовых шаблонов: стандартизированные текстовые шаблоны, совместимые с IFCPS, состоящие из активированных полей из оцифрованного шаблона отчета о кольпоскопии, а также индивидуально созданные текстовые шаблоны. Окончательный диагноз можно ввести в предоставленное поле.

ГИБКИЙ ЭКСПОРТ

Результаты обследования можно экспортировать простым кликом мыши. Затем результаты экспортируются в виде PDF-файла либо через интерфейс DICOM или GDT, либо через внешний носитель данных в подключенную информационную систему, и архивируются там. Отчеты также могут быть индивидуализированы, например, путем вставки адреса или логотипа больницы или практики в заголовок. Изображения, созданные во время обследования, могут быть экспортированы в качестве приложения к результатам кольпоскопии и/или в виде отдельных файлов.

ATMOS iDocuments GYN — ДОКУМЕНТАЦИЯ

Шаблон отчета о кольпоскопии? Оцифрован.

Шаблон отчета о кольпоскопии: Изюминкой нового программного обеспечения ATMOS iDocuments GYN является полностью оцифрованный шаблон отчета о кольпоскопии. Если раньше вам приходилось распечатывать, заполнять, сканировать и архивировать, то с ATMOS iDocuments GYN вам потребуется всего несколько кликов мыши.

ЦИФРОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Шаблон отчета о кольпоскопии, хранящийся в ATMOS iDocuments GYN, основан на номенклатуре кольпоскопии, принятой в Рио-де-Жанейро в 2011 году. Этот шаблон отчета о кольпоскопии содержит все необходимое гинекологам для документирования результатов кольпоскопии. Чтобы облегчить врачам работу, компания ATMOS полностью оцифровала шаблон отчета о кольпоскопии. Отдельные поля можно активировать или деактивировать, просто щелкнув по ним. Описать стык эпителиев, процентное соотношение изменений на шейке матки можно быстро и легко в цифровом виде с помощью ATMOS iDocuments GYN.



Максимальная
надёжность
процесса

ATMOS iDocuments GYN — УСТАНОВКА

Установка? Из коробки.

Распаковка, подключение, начало работы: Программное обеспечение ATMOS iDocuments GYN было разработано таким образом, чтобы его можно было быстро интегрировать в существующую практику или больничную сеть и управлять им впоследствии без особых усилий.

Простая
интеграция

ИДЕАЛЬНОЕ СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО В ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ И БОЛЬНИЦАХ



Программное обеспечение ATMOS i Documents GYN представляет собой закрытую автономную систему и работает на всех ПК и планшетах с операционной системой Windows, macOS или Android. Доступ к нему и управление им легко и удобно осуществляются через интерфейс браузера. Сертифицированное в соответствии со стандартами IEC 60601-1 и IEC 60601- 1-2 оборудование с пассивным охлаждением было разработано для непрерывной работы и имеет гальваническую развязку. Его простой и элегантный корпус не имеет углублений или отверстий, и его можно легко протереть от пыли или продезинфицировать.



БЫСТРЫЙ ЗАПУСК

ATMOS iDocuments GYN может быть быстро настроен и введен в эксплуатацию ИТ-командой клиники или больницы. Все, что нужно сделать, это подключить интерфейс, интегрированный в ATMOS iDocuments GYN, к существующей информационной системе и к соответствующим гинекологическим рабочим местам. Служба поддержки ATMOS будет рада оказать удаленную поддержку при вводе системы в эксплуатацию. Локальная установка на конечных устройствах не требуется. Концепция, основанная на использовании Интернета, сводит количество кабелей к минимуму.

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ

Для безопасного обмена данными с существующей информационной системой ATMOS iDocuments GYN имеет два стандартизированных интерфейса: DICOM и GDT. С помощью этих интерфейсов записи пациентов о предстоящих обследованиях могут быть загружены на локальные рабочие станции, отчеты об обследованиях могут быть повторно заархивированы в информационной системе после завершения обследования.



MedizinTechnik

ООО «АТМОС Медикаль»
105005, Россия, Москва,
Посланников переулок, 5, стр. 8
Телефон: 8-800-707-08-94 (бесплатный по России)
E-mail: atmosmed@atmosmed.ru
www.atmos-med.ru
www.atmosmed.com/ru



Отсканируйте QR-код и перейдите
на страницу оборудования для
гинекологии на нашем сайте